

IPL 8000

эпилятор



Использование данного аппарата налагает на пользователя ответственность за свои действия.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием аппарата и сохраните ее для возможного использования в будущем.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

В аппарате IPL 8000 TM используется новейшая технология для удаления нежелательных волос - технология IPL (интенсивного импульсного света).

Методика основана на поглощении света пигментом волоса – меланином. Выделяющаяся при поглощении энергия разрушает волосяной стержень и луковицу волоса - фолликул, не разрушая при этом целостности кожного покрова. Технология IPL обеспечивает быстрое и перманентное удаление волос. Универсальный метод позволяет безболезненно удалить волосы на ногах, руках, спине, груди; кроме того, с помощью аппарата IPL 8000 TM возможно удаление нежелательных волос в зонах повышенной чувствительности, таких как подмышечные впадины и линия бикини.

IPL 8000
эпилятор

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА


- 1 Ключ включения питания аппарата
(механический замок блокировки аппарата)
- 2 Кнопка увеличения интенсивности воздействия (+)
- 3 Кнопка уменьшения интенсивности воздействия (-)
- 4 Световой индикатор интенсивности воздействия
- 5 Индикатор ресурса лампы
- 6 Кнопка запуска работы аппарата
- 7 Разъем для подключения шнура питания
- 8 Гибкий соединительный шнур модуля
- 9 IPL модуль



ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

- 10 Кнопки подачи светового импульса (X2)
- 11 Синие световые индикаторы готовности аппарата к производству импульса
- 12 Картридж с лампой
- 13 Маркерная рамка зоны воздействия
- 14 Оранжевые световые индикаторы режима блокировки вспышки (X 2)
- 15 Апертурное окно интенсивного импульсного света
- 16 Сенсоры (x 4)
- 17 Лампа
- 18 Бритва
- 19 Шнур питания
- 20 Ключи для замка блокировки

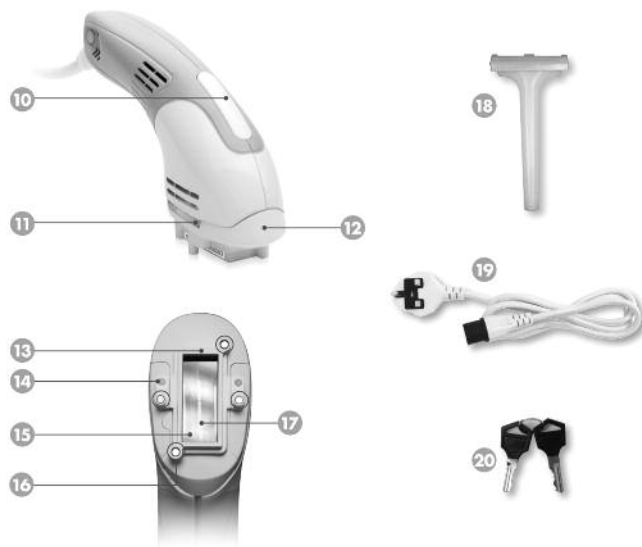

ЭПИЛЯТОР IPL 8000


ТИПЫ КОЖИ

Процедуры с применением интенсивного импульсного света подходят только для светлой и слегка смуглой кожи. С помощью технологии IPL наиболее эффективно удаление темных волос на светлой коже.


Рекомендуется выполнять процедуры на максимальной интенсивности излучения. Максимальная мощность излучения на разных участках может быть различной.

Типы кожи классифицируются по Фитцпатрику согласно фототипам. Таблицу с фототипами кожи Вы найдете в настоящем руководстве пользователя на стр. 8 , раздел «Типы кожи. Классификация типов кожи по Фитцпатрику».

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОЖИ

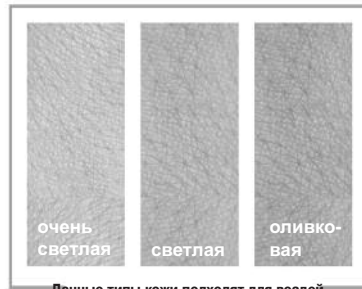


Данные типы кожи подходят для воздействия IPL.

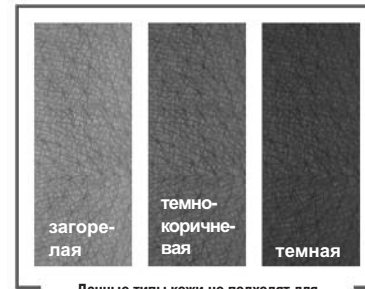

Данные типы кожи не подходят для воздействия IPL.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ

1. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед выполнением процедур, уделяя особое внимание разделам «Внимание!».
2. Определите свой фототип согласно таблице классификации типов по Фитцпатрику.
3. Проведите предварительный тест на переносимость Вами процедуры.
4. Подождите 24 часа.
5. Ваша кожа отреагировала на предварительный тест?
6. Да. Ознакомьтесь с возможными реакциями кожи (п. «Внимание!»).
7. Не выполняйте процедуру с использованием технологии IPL до тех пор, пока не пройдут реакции кожи.
8. Нет. Выполните процедуру.
9. Ваша кожа отреагировала на предварительный тест?
10. Ознакомьтесь с возможными реакциями кожи (п. «Внимание!»).

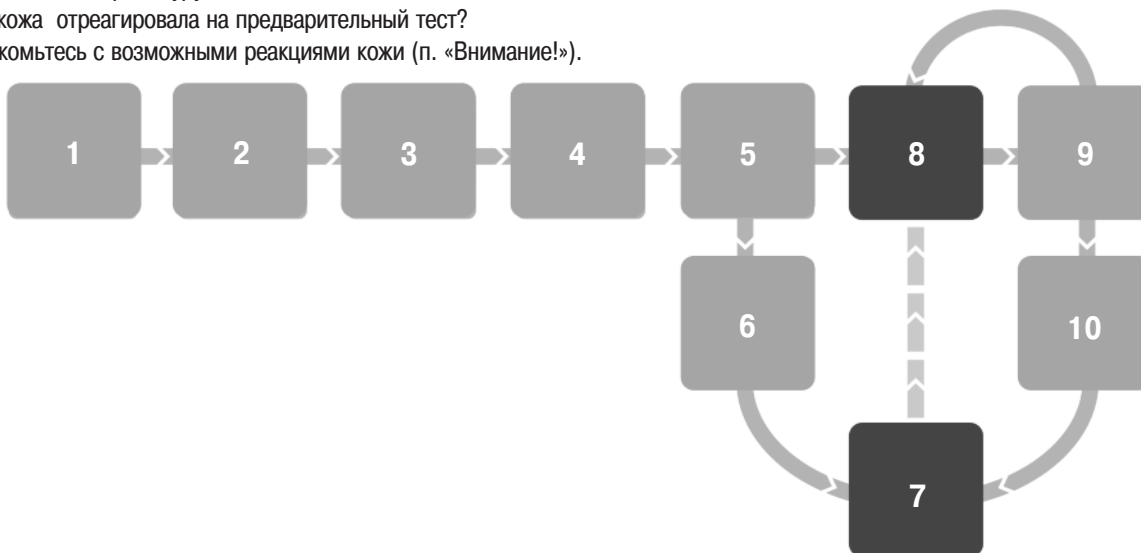

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аппарат не подходит для людей со смуглой или темной кожей. Даже если Ваш фототип подходит для выполнения процедур, не рекомендуется выполнять процедуры удаления волос с помощью технологии IPL, если Ваши ближайшие родственники имеют фототип, не подходящий для выполнения процедур с помощью IPL.

Данный способ удаления нежелательных волос также не подходит для выполнения процедур на загорелой коже (см. пункт «Типы кожи»).

Данный способ удаления волос не подходит людям с белыми волосами, а также для осветленных, седых или белых волос.

Участки кожи, которые не подходят для выполнения удаления волос с помощью IPL.

Категорически запрещается удалять волосы на лице, голове.

Не используйте аппарат на участках кожи с татуировками, перманентным макияжем, черными точками (папулы, акне), родинками, бородавками, в местах ожогов, заболеваний кожи, экзем, псориазе, нарушениях кожных покровов.

Не используйте аппарат для удаления волос на веснушках, в местах пигментации кожи, волосков в области губ, сосков, гениталий, ресниц, бровей и глаз.

Противопоказания к выполнению процедур

Не рекомендуется выполнять процедуры с помощью технологии IPL в следующих случаях:

- Людям с повышенной фоточувствительностью
- При беременности
- При грудном вскармливании
- При эпилепсии
- Категорически запрещается использование аппарата детьми
- При онкологических заболеваниях
- При приеме лекарственных средств, повышающих фоточувствительность - диуретики, антибиотики, антидепрессанты, а также при приеме лекарственных препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы, для лечения туберкулеза, артрита. Перед выполнением процедур с использованием IPL 8000 TM проконсультируйтесь с врачом.

Людям с ограниченными умственными и физическими способностями, детям, а также при недостаточном инструктаже относительно использования аппарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Противопоказания к выполнению процедур

Запрещается выполнять процедуры при онкологических заболеваниях.

Храните аппарат вне досягаемости детей и животных.

Не используйте аппарат в состоянии недомогания, усталости и после приема алкоголя.

Не выполняйте процедуры при заболеваниях сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системы, заболеваниях щитовидной железы.

Аппарат для эпиляции IPL 8000 TM не должен вызывать дискомфорта во время работы. Если при использовании аппарата у Вас возникло чувство дискомфорта, значит, Вы установили слишком высокую интенсивность излучения.

Не обрабатывайте один и тот же участок кожи несколько раз во время одной процедуры.

Аппарат предназначен для домашнего использования и не может быть использован в профессиональных целях.

Встроенная в аппарат система защиты делает его работу безопасной для глаз. Однако никогда не направляйте модуль с излучателем на глаза или в непосредственной близости от глаз.

Выполнение первой процедуры всегда начинается с минимальной интенсивности воздействия (1). Интенсивность может быть увеличена на 1 уровень после вспышки.

Перед началом процедуры снимите все украшения, находящиеся поблизости от зоны воздействия.

Не используйте аппарат вблизи легковоспламеняющихся веществ и материалов.

Не оставляйте аппарат без присмотра. В перерывах между процедурами храните аппарат и блокировочные ключи вне пределов досягаемости детей и животных.

Возможные реакции

Во время выполнения процедур большинство людей испытывают согревающее ощущение. Возможно также покраснение обрабатываемого участка, которое пройдет спустя 24 часа. При повышенной чувствительности кожи покраснение может пройти спустя 72 часа после выполнения процедуры. Для охлаждающего эффекта рекомендуется нанести гель с содержанием алоэ. В случае если спустя 48 часов покраснения, болевые ощущения в области обрабатываемого участка, зуд не пройдут необходимо обратиться к врачу.

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ

За 24 часа до выполнения процедуры необходимо провести тест на переносимость Вами процедуры удаления волос с помощью технологии IPL.

Тест на переносимость позволит Вам определить максимальную интенсивность воздействия для Вашего типа кожи. Для каждого обрабатываемого участка устанавливается своя интенсивность воздействия. Процедуры на каждом участке выполняются на максимальной мощности (см. классификация типов кожи по Фитцпатрику). С помощью кнопки увеличения интенсивности (+) постепенно увеличивайте интенсивность воздействия. Медленными движениями манипулы обрабатывайте участок кожи.


При возникновении дискомфорта сократите интенсивность воздействия.

Спустя 1 час после выполнения процедуры возможно покраснение обрабатываемого участка. Если спустя 24 часа после выполнения процедуры покраснение не пройдет – значит, была выбрана слишком высокая интенсивность воздействия.

Важно! Для удаления волос на различных участках необходимо устанавливать различные уровни интенсивности воздействия. На каждом участке необходимо проводить тест на максимальную интенсивность воздействия.

Классификация типов кожи по Фитцпатрику

| Тип кожи | Цвет кожи | Степень загара | Максимально допустимая сила излучения |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| I | «Очень светлая», прозрачная | Всегда обгорает, не загорает | Подходят все 5 уровней лазерного воздействия |
| II | Светлая | Всегда обгорает, загорает с трудом | |
| III | Светло-оливковая | Редко обгорает, загорает с трудом | |
| IV | Темно-оливковая | Очень редко обгорает, быстро загорает | Подходят 1, 2 и 3 уровни лазерного воздействия |
| V | Темно-коричневая | Очень редко обгорает | Не подлежит лазерному воздействию |
| IV | Темная | Никогда не обгорает | |

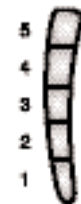

Подготовка к выполнению процедуры

Внимательно ознакомьтесь с разделом «Подготовка к выполнению процедуры» и убедитесь, что Вы ее правильно поняли.


- Перед выполнением процедуры не рекомендуется удалять волосы способом, предполагающим удаление волосяного фолликула (эпиляторы, воски и т.п.), это снизит ее эффективность.
- Перед началом процедуры снимите все украшения, находящиеся поблизости от зоны воздействия.
- Убедитесь, что вы выполнили тест на переносимость за 24 часа до выполнения процедуры. Установите необходимый уровень интенсивности воздействия.
- Во время проведения первой процедуры установите минимальный уровень воздействия (1) и при необходимости медленно увеличивайте ее во время выполнения процедуры.

Увеличение интенсивности воздействия.

При включении аппарата в целях Вашей безопасности устанавливается минимальная интенсивность воздействия (1). Увеличение интенсивности на 1 уровень возможно только после производства вспышки, тем самым, обеспечивая защиту от установки слишком высокой интенсивности воздействия. После установки интенсивности происходит ее проверка (световые индикаторы интенсивности попеременно высвечиваются, начиная с минимального (1), и заканчивая самым высоким (5); после чего световые индикаторы высвечиваются в противоположном порядке: с самого высокого уровня (5) до самого низкого (1).


ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Шаг 1

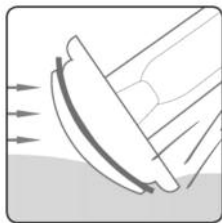

Перед выполнением необходимо сбрить волосы на обрабатываемом участке – это обеспечит большую эффективность процедуры. Выделяющаяся при поглощении энергия быстрее разрушает волосяной стержень и луковицу волоса - фолликул, не разрушая при этом целостности кожного покрова.

Шаг 2

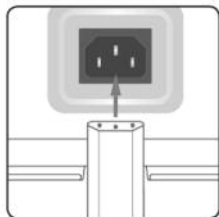

Подключите шнур питания к разъему на задней панели корпуса аппарата.

Шаг 3





Вставьте ключ в замок и поверните по часовой стрелке для разблокировки аппарата. Световой индикатор вокруг замка начнет мигать зеленым и раздастся 3 звуковых сигнала. При разблокировке аппарата по умолчанию устанавливается минимальный уровень интенсивности воздействия (1). При включении аппарата начинает работать встроенный вентилятор.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Шаг 4

Введите код безопасности, нажимая на кнопки (выделены черным) в следующем порядке (см. рис.)

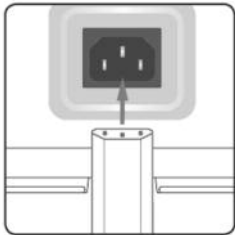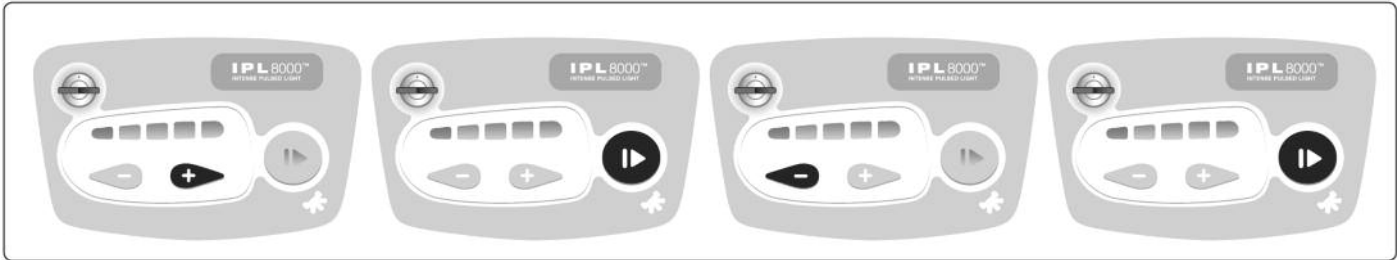

Если код введен правильно, аппарат будет разблокирован, и Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала, а световой индикатор вокруг ключа перестанет мигать и непрерывно высветится зеленым. При этом произойдет проверка аппарата, и индикатор мощности будет попеременно отображать самую высокую и низкую интенсивности воздействия (1 и 5).

При завершении проверки высвечивается индикатор минимальной интенсивности воздействия, и световой индикатор на кнопке запуска мигает синим, подтверждая готовность аппарата к работе.

Примечание: В случае если код был введен неверно, переключатель станет мигать не зеленым, а оранжевым светом, раздадутся 2 звуковых сигнала и аппарат блокируется. В этом случае выключите и снова включите питание аппарата при помощи ключа и повторите ввод кода.


ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ




Шаг 5

Однократно нажмите кнопку запуска аппарата ; она перестанет мигать, и высветится ровным синим светом. На модуле высвечиваются оранжевыми световые индикаторы.

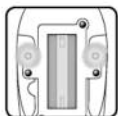

Примечание. Каждый раз после установки интенсивности воздействия, необходимо нажимать кнопку запуска аппарата .

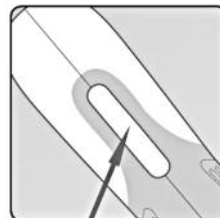


Шаг 7

Нажмите и удерживайте кнопку на рукоятке модуля для производства вспышки. Во время выполнения процедуры возможно ощущение тепла в области воздействия.

Внимание!

Не перемещайте модуль во время производства вспышки!

При выполнении процедуры возможно нагревание модуля – это является абсолютно нормальным.

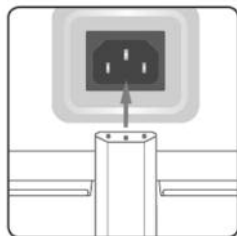

Шаг 6

Поместите модуль на кожу в зоне предполагаемого воздействия. Убедитесь, что все 4 сенсора хорошо касаются поверхности кожи. При контакте сенсоров с кожей вместо оранжевого световой индикатор высветится синим.

Примечание: При плохом контакте сенсоров с кожей или его отсутствии световой индикатор перестает высвечиваться синим. В этом случае снова повторите Шаг 6.


ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Шаг 8

После вспышки синий световой индикатор на модуле перестает высвечиваться. После каждой вспышки происходит проверка аппарата. Это может занять около 5 секунд, в это время световые индикаторы минимальной (1) и максимальной интенсивности (5) мигают, сменяясь с минимального уровня (1) до максимального (5).

При перемещении рукоятки с модулем на новую область следует обязательно кратковременно отрывать сенсоры от поверхности кожи.

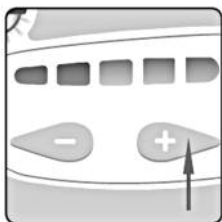

Для увеличения интенсивности воздействия для следующей процедуры необходимо нажать кнопку (+) и повторить шаг 5.

Важно! Не рекомендуется превышать указанную максимальную для вашего фототипа интенсивность воздействия на обрабатываемом участке.

Увеличение интенсивности воздействия.

При включении аппарата в целях Вашей безопасности устанавливается минимальная интенсивность воздействия (1). Увеличение интенсивности на 1 уровень возможно только после производства вспышки, тем самым, обеспечивая защиту от установки слишком высокой интенсивности воздействия. После установки интенсивности происходит ее проверка (световые индикаторы интенсивности попеременно высвечиваются, начиная с минимального (1), и заканчивая самым высоким (5); после чего световые индикаторы высвечиваются в противоположном порядке: с самого высокого уровня (5) до самого низкого (1).



Завершение процедуры.

По окончании выполнения процедуры выключите аппарат, повернув ключ против часовой стрелки. Уберите ключ в недоступное для детей место.

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

Дополнительная информация

- Если аппарат автоматически заблокировался (состояние индицируется кратковременным миганием голубых световых индикаторов), для разблокировки просто выключите аппарат с помощью ключа, подождите 5 секунд и снова включите.
- При перегреве аппарата высвечивается световой индикатор 2 уровня интенсивности и начинает мигать оранжевым световой индикатор на модуле. В этом случае аппарат необходимо выключить, тем самым, дав ему остыть.
- Мигающие световые индикаторы уровней интенсивности могут быть вызваны неверно введенным кодом. Если световые индикаторы продолжают мигать, обратитесь в уполномоченный сервисный центр или получите более полную информацию по обслуживанию аппарата на сайте www.gio-ipl.com.
- Если Вы не пользуетесь аппаратом, то через 20 минут автоматически включается энергосберегающий режим. Световой индикатор вокруг ключа высветится зеленым и световой индикатор уровня интенсивности 1 также высвечивается непрерывно. Для того чтобы включить аппарат, поверните ключ против часовой стрелки в положение «заблокировано» и назад в положение «разблокировано». Повторите шаг 4 (ввод кода и настройку уровня мощности).

Блокировка звуковых сигналов




Для блокировки звуковых сигналов однократно при включении аппарата нажмите кнопку запуска программ, одновременно поворачивая ключ.



Замечание: Предупреждающие звуковые сигналы не блокируются.

Хранение гибкого соединительного шнура

Оберните гибкий соединительный шнур вокруг направляющих, расположенных на днище корпуса аппарата.


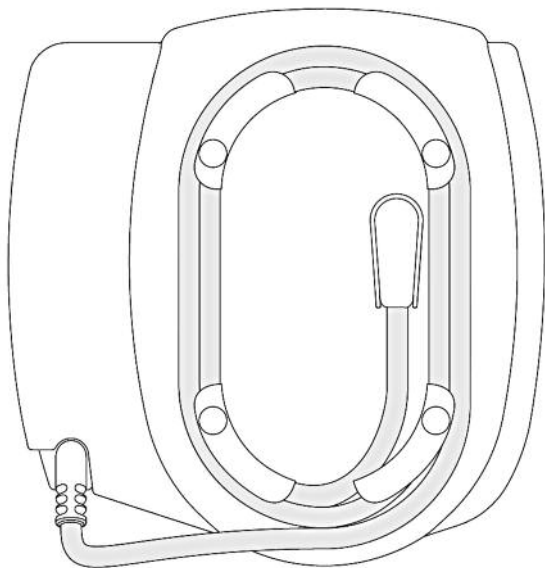


Зоны воздействия

Используйте след от маркерной рамки на коже для определения примерных границ зоны воздействия. Следует выполнять перекрытие зон воздействия при каждом перемещении модуля (во всех направлениях).

Для большего удобства определения примерных границ зоны воздействия рекомендуется использовать белый карандаш.

Важно! Не рекомендуется использовать черный карандаш или фломастер для определения примерных границ зоны воздействия – это может стать причиной реакции кожи.

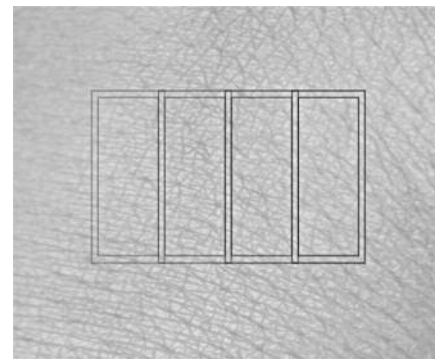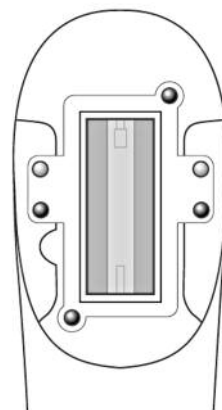

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

В аппарате для удаления волос IPL 8000 TM используется кварцевая лампа. В среднем, ресурс лампы рассчитан на 10 000 вспышек. Ресурс лампы зависит от множества факторов – от температуры помещения, в котором выполняется процедура, установленной интенсивности, скорости (частоты) вспышек.



Шаг 1


Выключите прибор и введите код.



Индикатор состояния ресурса лампы высвечивается желтым, если до выработки ресурса лампы остается 300 вспышек.




В случае если световой индикатор ресурса лампы вместо желтого сменяется мигающим красным необходимо сменить лампу.

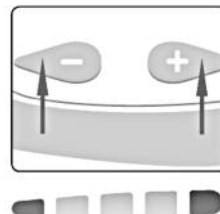

Шаг 2


Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (-) и (+) пока выполняется проверка аппарата. При этом высвечиваются световые индикаторы интенсивности 1 и 5.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

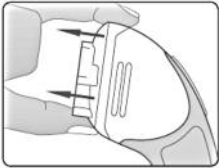


Шаг 3

Извлеките картридж (вместе с лампой) из модуля манипулы. Аппарат автоматически отключается.

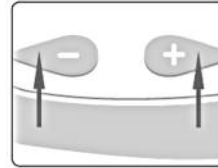


Шаг 5

Нажмите и удерживайте кнопки (-) и (+). Высветится индикатор лампы и световые индикаторы интенсивности воздействия 1 и 5 перестают высвечиваться. При этом синим высвечивается кнопка запуска программ, подтверждая готовность аппарата к работе.

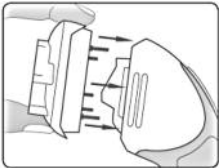

Шаг 4

Убедитесь, что металлические выводы картриджа попадают в соответствующие отверстия модуля. Аппарат автоматически включается. При включении аппарата высвечиваются световые индикаторы интенсивности воздействия 1 и 5.

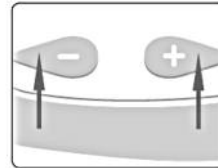


Примечание. При некорректной установке лампы или ее отсутствии работа аппарата не запускается.

Дополнительные картриджи можно приобрести у официального представителя компании RIO.

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ФАЗЫ РОСТА ВОЛОС

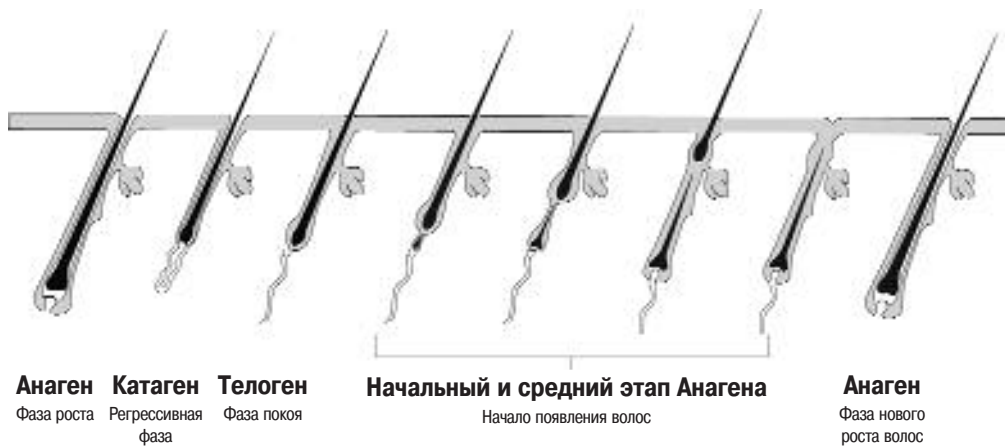

Почему необходимо проведение серии процедур?

Интенсивность роста волос варьируется в зависимости от возраста, веса, особенностей обмена веществ, гормональных процессов, национальности, приема медицинских препаратов и др. факторов. Различают 3 фазы роста волос:

Активная фаза роста (анаген), которая длится от 2 до 7 лет. Рост нового волоса начинается от дермального сосочка, который находится в основании волосяной луковицы. Луковица состоит из клеток, которые, усиленно делясь, образуют волос. В некоторых частях тела, например, на голове, большинство (83 %) волос находится в этой фазе. В период анагена волос содержит достаточное количество меланина.

Регрессивная фаза (катаген), которая длится от 10 до 20 дней. В этот период волос перестает расти, но еще не выпадает. Около 3–4% волосяного покрова тела находится в этой фазе. В период катагена фолликул сморщивается и сокращается, что приводит к выпадению волоса.

Фаза покоя (телоген), которая длится от 6 недель до 6 месяцев. В период телогена старый волос выпадает и начинает расти новый. Волосяной фолликул в это время не подлежит эпиляции.

Эпиляция эффективна, только когда волос находится в активной стадии роста. Если Вы хотите избавиться от нежелательных волос на долгое время, необходимо провести серию процедур (минимум 6, с перерывом 4 недели).

Во время проведения одной процедуры невозможно разрушить все

волосяные фолликулы, т.к. все фолликулы не могут находиться в активной фазе роста одновременно. Одни фолликулы разрушаются, другие – уменьшаются, и волосы, растущие из них, превращаются в пушок, а третьи – просто «засыпают». При появлении новых волос первоначальную процедуру необходимо повторить для обработки наиболее активных волосяных фолликулов, на которых не действовала эпиляция. Повторить эпиляцию можно спустя 4 недели. Повторные сеансы эпиляции, проводимые через определенный промежуток времени, направлены на удаление новых волос, перешедших из стадии покоя в фазу роста.

| Часть тела | Плотность роста волос (фолликула на см) | Фаза покоя (телоген) | Продолжительность фазы покоя | Активный рост |
|--------------|---|----------------------|------------------------------|---------------|
| Руки | 80 | 18% | 5 месяцев | 79% |
| Ноги | 60 | 18% | 6 месяцев | 79% |
| Подмышки | 65 | 28% | 3 месяца | 69% |
| Грудь/спина | 70 | 28% | 3 месяца | 69% |
| Линия бикини | 70 | 25% | 3 месяца | 71% |

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как подготовить кожу к удалению волос с помощью IPL?

Не требуется никаких специальных подготовительных процедур. Следите за тем, чтобы Ваша кожа всегда была чистой. Технология IPL наиболее эффективна для светлой кожи, поэтому рекомендуется проводить меньше времени на солнце и не использовать средства для автозагара.

Как подготовить волосы к IPL?

Для достижения оптимального результата рекомендуется предварительно сбрить волосы. Минимальная длина волоса позволяет выделяющейся энергии света быстрее пробежать волос от кончика до корня, разрушив волосяной фолликул, не разрушая при этом целостности кожного покрова, ожогов кожи.

Какие участки тела

можно обрабатывать аппаратом IPL 8000 TM?

В большинстве случаев это подмышки, ноги, область груди, спины и зона бикини. Не рекомендуется использовать аппарат IPL 8000 для удаления волос на лице.

Какие ощущения возникают при выполнении процедуры?

В большинстве случаев возникает согревающее ощущение. При слишком высокой интенсивности воздействия или на предварительно неподготовленных участках возможно небольшое раздражение схожее с солнечным ожогом. Ввиду большей толщины волоса, муж-

чины чаще, чем женщины испытывают дискомфорт во время выполнения процедуры. Дискомфортные ощущения быстро проходят.

Можно ли выполнять процедуры с помощью технологии IPL при чувствительной коже?

Да. Выделяющаяся при поглощении энергии разрушает волосяной стержень и луковицу волоса - фолликул, не оказывая воздействия на кожу.

Как будет выглядеть кожа после эпиляции? Возможны ли побочные эффекты?

Возможно появление легкой припухлости или покраснения, которые исчезнут спустя 24 часа. Возможно также локализованное покраснение вокруг волосяного фолликула – это является нормальной реакцией. Если спустя 24 часа после выполнения процедуры покраснение не проходит, значит, вы выбрали слишком высокую для своего типа кожи интенсивность воздействия при выполнении процедуры. Пожалуйста, подробно изучите раздел настоящего руководства пользователя «Тест на переносимость».

Какие меры предосторожности необходимо предпринять после проведения эпиляции?

Избегайте длительного пребывания на солнце, по крайней мере, в течение 48 часов после эпиляции. До выполнения следующей процедуры не рекомендуется загорать, в том числе в солярии. Используйте солнцезащитный крем перед выходом на улицу. Не используйте абразивные очищающие средства и пилинги, которые

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

могут вызвать раздражение кожи. В течение следующих 48 часов после эпиляции избегайте контакта кожи с хлорированной водой – не плавайте в бассейне, не принимайте ванну или душ. Контакт кожи с хлорированной водой может вызвать жжение.

Когда можно проводить повторный сеанс эпиляции?

Рекомендуется выполнять процедуры 2 раза в месяц (с 2-недельным интервалом). Частота выполнения процедур напрямую зависит от обрабатываемого участка и индивидуальных особенностей. При отсутствии раздражения кожи повторно процедуру можно проводить уже через 48 часов – такой интервал между процедурами позволит волосу отрасти. Рекомендуется проводить повторный сеанс через 4 недели. Не обрабатывайте один и тот же волос несколько раз во время одной процедуры – это может послужить причиной раздражения и припухлостей.

Как нужно ухаживать за кожей после эпиляции?

После эпиляции возможно появление легкой припухлости или покраснения, которые исчезнут спустя 24 часа. По желанию после эпиляции Вы можете нанести успокаивающий кожу лосьон, не содержащий парфюмированных отдушек, а также охладить кожу с помощью пакетика со льдом или влажного полотенца.

В течение 3 дней уделяйте особое внимание гигиене участков кожи, подвергшихся эпиляции. Рекомендуется использовать дважды в день антибактериальное мыло.

После эпиляции в области подмышек не пользуйтесь дезодорантом в течение 2–3 дней. Используйте антибактериальное мыло дважды в день. Избегайте солнечных лучей.

Сколько сеансов эпиляции потребуется провести?

Технология позволяет добиться положительных эффектов как минимум после 6 процедур за 6 месяцев. Количество сеансов варьируется в зависимости от физиологических особенностей человека, зоны обработки, цикличности роста волос, густоты и цвета волос. Эпиляция с помощью IPL идеальна для удаления темных волос на светлой коже. Для удаления как темных, так и светлых волос на долгое время потребуется не меньше 6 сеансов эпиляции. С каждой процедурой Вы будете отмечать постепенное уменьшение количества нежелательных волос. Женщинам с повышенной волосистостью, вызванной избыточным содержанием мужских гормонов в организме, потребуется более 6 процедур эпиляции для достижения стойкого положительного эффекта.

Какие способы удаления волос можно использовать в перерывах между сеансами эпиляции?

В перерывах между сеансами эпиляции не рекомендуется удалять нежелательные волосы с помощью воска, пинцета, эпиляторов, т.к. для эффективности процедуры рекомендуется обрабатывать фолликул с волосом.

Обесцвечивание волос удаляет естественный пигмент и снижает

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

эффективность эпиляции с использованием IPL.

Бритье, микродермобразия и кремы-депиляторы идеально подходят для использования в перерывах между сеансами эпиляции.

В чем разница между технологией IPL и лазерной эпиляцией?

В отличие от лазерной эпиляции, с помощью интенсивного импульсного света (IPL) возможно быстро обрабатывать большие участки. Лазер - источник узконаправленного когерентного света, в то время как в основе технологии IPL – использование широкого спектра электромагнитных излучений. Под воздействием светового импульса происходит разрушение волосяного фолликула. Эффективность процедуры определяется фототипом кожи, возрастом, цветом волос.

Каков размер обрабатываемого участка?

35 мм X 14 мм

Почему необходимо сбрить волосы перед выполнением процедуры?

Рекомендуется предварительно сбрить волосы, т. к. поглощающаяся энергия быстрее достигает волосяного фолликула, разрушая его, тем самым, повысив эффективность процедуры.

Какие функции безопасности есть у аппарата IPL 8000?

Главной функцией безопасности аппарата является увеличение интенсивности воздействия. Во время выполнения процедуры увеличение интенсивности воздействия возможно на 1 уровень. При запуске аппарата по умолчанию устанавливается минимальный уровень интенсивности воздействия – 1. Данная функция позволяет избежать риска выбора слишком высокой интенсивности.

Информация о системе безопасности аппарата IPL 8000 TM.

1. Аппарат имеет ключ механической блокировки включения.
2. При включении питания аппарата запрашивается код безопасности.
3. Сенсоры, разрешающие выполнение процедуры, только если модуль плотно прижат к коже.
4. Оранжевый световой индикатор. При направлении модуля в глаза световой индикатор начинает мигать оранжевым.
- 5.УФ - фильтр
- 6.Детектор перегрева аппарата

Возникают ли побочные эффекты?

Принцип работы аппарата основан на поглощении световой энергии. Под воздействием светового импульса происходит разрушение волосяного фолликула, что может вызвать покраснения кожи, которое проходит спустя 24 часа после процедуры.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Не храните аппарат при температуре свыше 40°C и ниже 15 0 С. Не закрывайте вентиляционный паз аппарата во время выполнения процедуры.

Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью (около бассейна, в ванной комнате). Запрещается использование аппарата при попадании внутрь его корпуса воды.

- Не погружайте корпус аппарата в воду.

Используйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер.

- После каждой процедуры отключайте аппарат от сети и храните его вдали от детей.

- Не используйте аппарат при повреждении его корпуса, модуля, рукоятки, соединительного шнура.

- При повреждении соединительного шнура немедленно замените его на новый, обратившись к производителю или его официальному представителю.

- В случае неисправности не разбирайте аппарат на части и не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. По всем вопросам ремонта и обслуживания аппарата обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.

- По окончании сеанса эпиляции протирайте корпуса аппарата мягкой влажной тканью без ворса.

- Нестабильная работа аппарата может быть вызвана воздействием внешнего электромагнитного источника излучения. Выключите возможный источник электромагнитного излучения и попробуйте включить аппарат еще раз.

- Использование аппарата не по его прямому назначению или с нарушениями требований сопроводительной документации могут привести к причинению травмы или иного ущерба.

- Периодически проверяйте состояние апертурного окна интенсивного импульсного света. Его загрязнение может повлиять на эффективность работы аппарата. Если вы заметите следы загрязнений, выключите питание аппарата, отключите адаптер от сети и проведите очистку с помощью мягкой ткани или ватным диском, не оставяющими волокон. Обязательно убедитесь, что на линзе не осталось волокон!

- Нестабильная работа аппарата может быть вызвана воздействием внешнего коротковолнового или микроволнового излучения. • Переместите аппарат на большее удаление от источника излучения.

Утилизация

- Убедитесь, что аппарат утилизован в соответствии с действующими нормами утилизации Вашей страны.

- Запрещается утилизировать аппарат или его отдельные части все вместе с другим мусором.

ЭПИЛЯТОР IPL 8000

UK



Произведено The Dezac Group Ltd
PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET